



Cherry medical holding
(Shenzhen) Co., LTD

DATENBLATT

Datasheet
Partikelfiltrierende Halbmaske - Premium
Atemschutzmaske

CE 0598
SGS
Finnland

Modellbezeichnung: QRYW202005

“NR” steht für “Nicht Wiederverwendbar” (nur eine Schicht bzw. 8 Stunden nutzbar).

Geprüft und Zertifiziert: SGS FIMKO OY, Finnland (CE 0598), Nr. FI20/966583 Baumusterprüfung Typ B, Nr. CN20/42384 Produktüberwachung Modul C2. Sowie permanente interne und externe Fertigungskontrollen

Produkte entsprechen der Europäischen Norm EN149:2001+A1:2009 und der PSA Verordnung (EU) 2016/425. Das Produkt ist Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der PSA Verordnung (EU) 2016/425.

Lagerbedingungen: gut belüftete, dunkle und trockene Umgebung. Von Feuer, Schadstoffen und Verschmutzungsquellen fernhalten, Lager- und Transporttemperatur -20°C bis +40°C, Luftfeuchte ≤80%

Ende der Lagerzeit, Fertigungslos, Herstellungsdatum: 3 Jahre ab der Herstellung

Packungseinheiten:

- | | | |
|--|-------------|--|
| 6 er Box, 240 Boxen / Karton = 1440 Stück, | Variante 1: | 6 x Einzelverpackte Masken (Apothekenpack) |
| | Variante 2: | 1 x Beutel mit 6 FFP2 Maske |
| 50 er Box, 20 Boxen / Karton = 1000 Stück, | Variante 1: | 1 x Beutel mit 50 FFP2 + 1 Bedienungsanleitung |
| | Variante 2: | 5 x Beutel mit 10 FFP2 + 5 Bedienungsanleitung |
| | Variante 3: | 50 x Einerpack FFP2 + 9 Bedienungsanleitung |



Variante: 6 Pack 6 einzeln verpackte Masken



Variante: 6 Pack mit 6 FFP2 Masken in einer Tüte



Variante: 50er Box mit 50 Masken in einer Tüte und 9 Bedienungsanleitungen
 Alternative auch erhältlich: 50er Box mit 50 Masken in 50 Tüten und 9 Bedienungsanleitungen



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Atemschutzmaske wie gezeigt in der Hand halten – die Schlaufen nach unten, die Fingerschleife am Nasenbügel.
2. Die Maske aufs Gesicht setzen, dabei den Nasenbügel auf dem Nasenrücken platzieren.
3. Beide Ohrenschnäulen mit den Händen fassen und die Schlaufen über die beiden Ohren führen.
4. Mit beiden Händen den Nasenbügel auf die Nase drücken und so formen, dass er sich der Form der Nase anpaßt.
5. Den korrekten Sitz der Maske überprüfen, indem Sie beide Hände über die Maske halten und kräftig ausatmen. Spüren Sie noch ausweichende Luft rund um die Maskenränder, den Nasenbügel erneut anpassen oder die Spannung der Gummibänder erhöhen. Den Vorgang wiederholen, bis die Maske gut sitzt.
6. Durchnässte Masken sofort ersetzen!
7. Vollständige Gebrauchsanleitung inlegend beachten!

Hersteller: Cherry medical holding (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: Room 602, Yuanling Building, No. 2002, Hongli Road, Nantian Community, Yuanling Street, Futian District, Shenzhen, China

Name, Anschrift und Kennnummer der notifizierten Stelle für die Konformitätsbewertung
SGS FIMKO OY, Notified Body 0598
Adresse: Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland

Alleinimporteur: LBC k.s., www.Schnoth.cz
Holsicka 2220, 190 16 Prag, Tschechien
EC Konformitätserklärung und Informationen: <https://naefko-schnoth.cz>

CE 0598






615mm*405mm*495mm





670mm*260mm*340mm

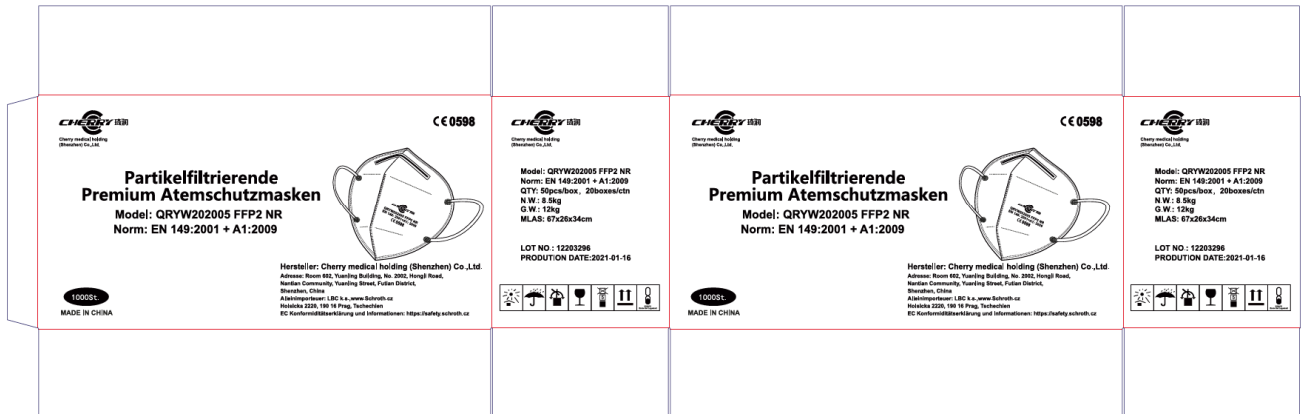

Cherry medical holding (shenzhen) Co.,Ltd.


Room 602, Yuanfeng Building, No.2002, Hongli Road,
Nantian Community,
Yuanfeng Street,
Futian District,
Shenzhen,
China

It is certified that the manufacturer's technical file and the PPE product detailed on
page 2 have been assessed and found to be in accordance with

Regulation (EU) 2016/425 Module B, EU type-examination

This certificate is valid from 15 September 2020 until 15 September 2025
1. Certified since 15 September 2020

Authorised by

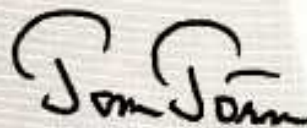

SGS FIMKO OY, Notified Body 0598
Tolokantie 6, FI-00280, Helsinki, Finland
t +358 9 696 351 f +358 9 692 5474 www.sgs.com



FINAS
Finnish Accreditation Service
S003 (EN ISO/IEC 17065)

Page 1 of 2



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Service available at www.sgs.com/terms_and_conditions.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
forum established therein. The authenticity of this document may be verified at
<http://www.sgs.com/technical-certificates-and-products/verified-certificates>.
Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest
extent of the law.

Certificate CN20/42384

The management system of

Cherry Medical Holding (Shenzhen) Co., Ltd.

Room 602, Yuanling Building, No. 2902, Hongli Road,
Nantian Community, Yuanling Street, Futian District, Shenzhen, China

has been assessed and certified as meeting the requirements of

Regulation (EU) 2016/425 Module C2

For the following activities

Manufacture of CHERRY (logo) QRYW202005 particle filtering half mask.

(Note: All products marked CE0598 must have a valid EU type-examination certificate issued under Module B or a valid EC type-examination certificate issued under Article 10 of Directive 89/686/EEC.)

This certificate is valid from 19 October 2020
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 1. Certified since 19 October 2020

Authorised by

SGS FIMKO OY, Notified Body 0598

Talonkatu 1, FI-00380 Helsinki, Finland
T +358 9 896 351 F +358 9 692 5474 www.sgs.com

Page 1 of 1

FINAS
Finnish Accreditation Service
S003 (EN ISO/IEC 17065)



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Service available at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. It is the holder's responsibility to verify the validity and applicability of the document. The authenticity of this document can be verified at <http://www.sgs.com/certificates/verify>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is illegal and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0599

Test Report **SL52035261731301TX** **Date: July 09, 2020** **Page 1 of 6**
 CHERRY MEDICAL HOLDING (SHENZHEN) CO., LTD.
 ROOM 802, YUANLING BUILDING, NO.2002, HONGLI ROAD, NANTIAN COMMUNITY, YUANLING STREET,
 FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description : (A)Face mask

Style No. : QRYW202005

Sample Color : (A)WHITE

Previous No. : SL52025269209201TX

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant

Sample Receiving Date : Jun 29, 2020

Testing Period : Jun 29, 2020 - Jul 09, 2020

Test Result(s) : Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, for further details, please refer to the following page(s).

Based on the results of the tests reported and the previous report SL52025269209201TX issued on Jun 20,2020, our Lab concluded that the recommendation level can be as below.

Sample No.	Recommendation Level
(A)	FFP2 NR

Signed for and on behalf of
 SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Testing Center

Sara Guo (Account Executive)



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Sale as printed on each invoice or available at <http://www.sgs.com>, enquiry@sgs.com and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Transactions at <http://www.sgs.com/electronic>. Document type: Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clause printed therein. Any notice or other communication advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from asserting all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and shall be regarded as released by SGS-CSTC.

Attention: For the sole authority of testing and reporting, please refer to the report & certificate issued by the laboratory: 08 710 000 1442, or email: CS.Detect@sgs.com

375, Kailash Road, Yangpu District, Shanghai, China 200233 ☎ (86-21) 81402096 ☎ (86-21) 84938700 www.sgs.com.cn
 中国·上海·徐汇区宜山路899号540楼 邮编 200235 ☎ (86-21) 81402096 ☎ (86-21) 84938700 s.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Test Result

Personal Protective Equipment - Respiratory Protective Devices- Filtering Half Masks to Protect against Particles- Requirements, Testing, Marking

EN 149:2001+A1:2009

Clause 7.4 Packaging

(EN 149:2001+A1:2009 Clause 8.2)

Test Requirement	Results	Comment
Particle filtering half masks shall be offered for sale packaged in such a way that they are protected against mechanical damage and contamination before use.	Comply	Pass

Clause 7.7 Practical Performance

(EN 149:2001+A1:2009, Clause 8.4)

Test Requirement	Results	Comment
The particle filtering half mask shall undergo practical performance tests under realistic conditions. These general tests serve the purpose of checking the equipment for imperfections that cannot be determined by the tests described elsewhere in this standard.	No imperfections	Pass

Clause 7.8 Finish of Parts

(EN 149:2001+A1:2009, Clause 8.2)

Test Requirement	Results	Comment
Parts of the device likely to come into contact with the wearer shall have no sharp edges or burrs.	No sharp edges or burrs	Pass



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on order, available on request or accessible at <http://www.sgs.com> (English) and <http://www.sgs.com.cn> (Chinese). Terms and conditions of sale are stated in the contract of sale or communication and shall prevail in case of conflict. Any holder of this document is notified that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a guarantee for a transaction free of all risks and obligations under the transaction concerned. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. To ensure the confidentiality of test data, please contact us at sgs@sgs.com or sgs@sgs.com.cn.

丁巳路1000号, 上海, 中国 200233 1 (36-21) 4142880 1 (36-21) 5422763 www.sgs.com
 中国 - 上海 - 浦东新区金山路650号 邮编: 200235 1 (36-21) 4142880 1 (36-21) 5422763 sgs.china@sgs.com

Test Result

Personal Protective Equipment - Respiratory Protective Devices- Filtering Half Masks to Protect against Particles- Requirements, Testing, Marking

EN 149:2001+A1:2009

Clause 7.4 Packaging

(EN 149:2001+A1:2009 Clause 8.2)

Test Requirement	Results	Comment
Particle filtering half masks shall be offered for sale packaged in such a way that they are protected against mechanical damage and contamination before use.	Comply	Pass

Clause 7.7 Practical Performance

(EN 149:2001+A1:2009, Clause 8.4)

Test Requirement	Results	Comment
The particle filtering half mask shall undergo practical performance tests under realistic conditions. These general tests serve the purpose of checking the equipment for imperfections that cannot be determined by the tests described elsewhere in this standard.	No imperfections	Pass

Clause 7.8 Finish of Parts

(EN 149:2001+A1:2009, Clause 8.2)

Test Requirement	Results	Comment
Parts of the device likely to come into contact with the wearer shall have no sharp edges or burrs.	No sharp edges or burrs	Pass



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Products/Services/Testing/Services> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Conditions/Document-as-a-Service>. Attention is drawn to the existence of battery, communication and jurisdiction clauses in the said Terms. Any holder of this document is notified that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a guarantee for a transaction free of all risks and obligations under the transaction concerned. This document cannot be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only. Information: To check the authenticity of this report, please contact us at info@sgs.com or www.sgs.com.

丁字路口, 上海, 中国, 邮编: 200233 | 电话: +86 (0)21 54229888 | 传真: +86 (0)21 54229783 | 网站: www.sgs.com
 中国 - 上海 - 浦东新区金山路666号 | 邮编: 200233 | 电话: +86 (0)21 54229888 | 传真: +86 (0)21 54229783 | 网站: www.sgs.com

Clause 7.9.1 Total Inward Leakage
(EN 149:2001+A1:2009, Clause 8.5)

Test Requirement	Results	Comment
<p>The total inward leakage consists of three components: face seal leakage, exhalation value leakage (if exhalation value fitted) and filter penetration. For particle filtering half masks fitted in accordance with the manufacturer's information, at least 46 out of the 50 individual exercise results (i.e. 10 subjects x 5 exercises) for total inward leakage shall be not greater than: 25% for FFP1, 11% for FFP2, 5% for FFP3</p> <p>and, in addition, at least 8 out of the 10 individual wearer arithmetic means for the total inward leakage shall be not greater than: 22% for FFP1, 8% for FFP2, 2% for FFP3</p>	Detail refer to Appendix 1	Meet FFP1 Meet FFP2

Appendix 1: Summarization of Test Data

Inward Leakage Test Data

Subject	Sample No.	Condition	Walk(%)	Head Side/side(%)	Head up/down(%)	Talk(%)	Walk(%)	Mean(%)
Zhou	1	A.R.	6.18	4.92	7.06	6.42	5.81	6.07
Luo	2	A.R.	8.04	7.47	6.51	7.18	7.11	7.28
Lu	3	A.R.	4.79	7.03	5.20	6.35	7.41	6.16
Wang	4	A.R.	4.77	6.39	5.27	5.31	5.14	5.38
Bao	5	A.R.	6.47	7.86	6.72	7.82	7.25	7.22
Ding	6	T.C.	5.13	5.90	5.38	5.74	5.71	5.57
Li	7	T.C.	8.21	5.72	6.73	8.99	7.44	7.42
Chen	8	T.C.	5.79	6.60	5.92	4.26	5.61	5.64
Song	9	T.C.	6.78	7.40	6.35	5.56	5.84	6.38
Ye	10	T.C.	8.40	7.02	7.36	6.94	7.84	7.51

Facial Dimension(mm)

Subject	Face length	Face Width	Face Depth	Mouth Width
Chen	125	150	120	58
Lu	115	132	107	48
Zhou	115	135	108	52
Li	125	130	107	46
Luo	125	136	100	43
Zheng	128	140	112	55
Wang	120	147	103	48
Song	120	140	100	50
Bao	130	134	104	50
Ding	134	150	110	52
Liu	120	135	117	50
Ye	126	137	105	52



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on request, available to request or accessible at <http://www.sgs.com/zh> (or <http://www.sgs.com/zh>) and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/zh/terms-and-conditions/terms-and-conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and arbitration clause defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. Client, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not constitute parties to a transaction (nor associating all their rights and obligations under the transaction documents). This document cannot be reproduced without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offences may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the samples (see label and such samples) as are retained for 30 days only.

Address: Tsinghua University Building, Beijing Road, Shanghai, China 200283 | (86-21) 61432880 | (86-21) 64225753 | www.sgs.com/zh
 中国·上海·南京路100号·清华大学楼 | 邮编: 200283 | (86-21) 61432880 | (86-21) 64225753 | www.sgs.com/zh

Member of the SGS Group (SGS SA)

Hersteller: Cherry medical holding (Shenzhen) Co., Ltd,
 Room 602, Yuanling Building, No. 2002, Hongli Road, Nantian Community, Yuanling Street, Futian District, Shenzhen, Volksrepublik China

Notifizierte Stelle:
 SGS FIMKO OY, (CE 0598), www.sgs.com
 Takomotie 8, Fi-00380 Helsinki, Finland

Alleinimporteur:
 LBC k.s., Holsická 2220, CZ 190 16 Prag, Tschechien, <https://www.schroth.cz>
 EU-Konformitätserklärung, Sicherheitshinweise, Gebrauchsanleitung: <https://safety.schroth.cz>